

Tribos 501

Созданы по законам природы Дитером Шульцем и Яном Шунеманом

Карта зубов



Таунг-Чайлд: Репродукция
"Трибосфенного" моляра,
возраст 2 млн. лет



Вид современного первого
нижнего моляра



Акриловые зубы

НОВИНКА!



Фронтальные зубы V & VL
создают новые масштабы

по Яну Шунеману

Tribos 501



Tribos 501





“Сложность рельефа зубов обусловлена Трибосфеническим моляром. Все это - результат долгой истории, насчитывающей миллионы лет. Tribos 501 - это идеальное воспроизведение “живого” зуба, где форма, функция и эстетика заимствованы от природы, при этом учтены все научные элементы зубов. Данное положение имеет существенное значение и обязательно принимается во внимание для естественной окклюзии и корректного функционирования всей жевательной системы.”

Цитата Отмара Кюльмера, Научный исследовательский институт Зенкенберг, Франкфурт

Искусственные зубы Tribos 501 - уникальные изделия, разработанные и изготовленные по новой методике конденсации “Mega-Press-Inject” для оптимизации плотности и твердости поверхности зуба из полиметилметакрилата в три слоя. Это особенно важно для долговечности и чувствительности протеза к зубному налету. Пациент с первого же раза почувствует точно подобранную форму и твердость Tribos 501, сопоставимую с точностью CAD/CAM.

Фронтальная группа

**623 руб.
(15 Евро)***

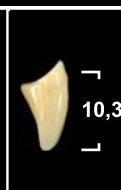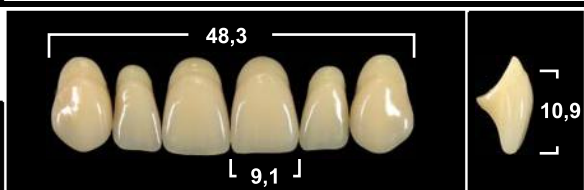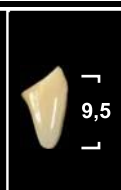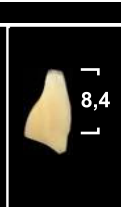T24 ▲			R14 ■		
T27 ▲			R17 ■		
T66 ▲			R66 ■		
T76 ▲			O31 ●		
T99 ▲			O54 ●		
L3			L5		
L7			L8		
L9			▲  ■  ● 		

Новинка!

Фронтальные зубы V и LV, разработанные совместно с Яном Шунеманом, создают новые масштабы!





С помощью фронтальных зубов Tribos V и LV можно изменить основу зуба - его маску и характер до 30%. В результате вы можете создать множество индивидуальных форм зубов.

Благодаря V и LV хватает лишь 5 форм (в целом из 20) для почти 100% замены всех форм!

Естественная трехмерная анатомическая форма зубов позволяет выполнить постановку зубного ряда с естественным поворотом зубов без увеличения зубного пространства. Это дает возможность индивидуальной постановки зубов, соответствующей индивидуальным особенностям и возрасту пациента.

Естественное наложение, ярко выраженная прозрачность режущего края, соответствующая возрасту шелковистость структуры, а также выделенные опаловые эффекты в разносторонней игре света - это и есть особенные признаки фронтальных зубов V и LV.

Зубы созданы Яном Шунеманом.

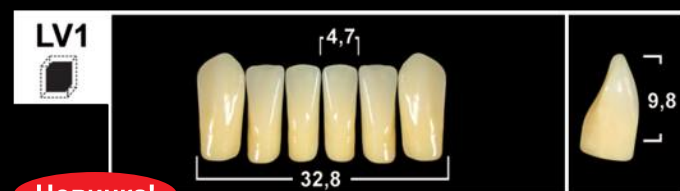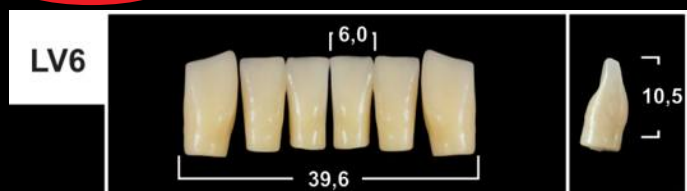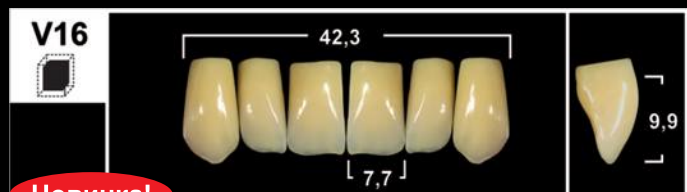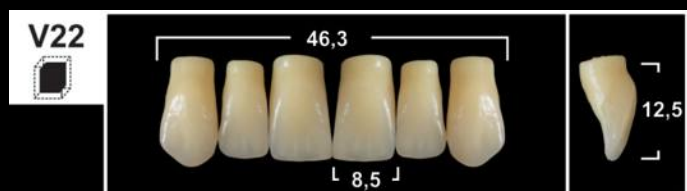

Новинка!

Новинка!

Новинка!

Жевательная группа

623 руб.
(15 Евро)*

Морфология зубов Tribos 501 основана на теории НФП "Натуральный и Функциональный Протез", став результатом 3 лет морфологических исследований, а также обширных знаний и практического опыта Дитера Шульца (Dieter Schulz).

Первичная морфология - Вторичная морфология - Вторичная морфология, абразивная


Первичная морфология



Первичная Морфология (PM/PS): морфология зуба в молодом возрасте, без абразии и без контактных поверхностей. Основание зуба снижено что позволяет использовать его при полном съемном протезировании, а также при протезировании на имплантатах.

Монтажный стол 140
Саггиталь
Уклон, боковой мышечковый (SKN)
FH 45° - CE 30°
Угол Беннетта 10° ISS 0,5 мм
Латеротрузия LRT -20°
Ретрузия RT 0,5 mm

PS

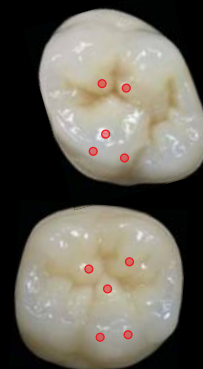

Вторичная морфология

SM



Вторичная Морфология (SM/SS): морфология зуба, уже имеющая некоторую абразию на зубных бугорках и некоторые контактные поверхности. Основание зуба снижено.

Монтажный стол 140

Саггиталь

Уклон, боковой мышечковый (SKN)

FH 30° - CE 15°

Угол Беннетта 10° ISS 1,0 мм

Латеротрузия LRT -20°

Ретрузия RT 1,0 мм

SS



Вторичная морфология, абразивная

SLA



Вторичная Морфология, абразивная (SLA/SMA/SSA): морфология зуба с множественной абразией на зубных бугорках и множественными контактными поверхностями. Благодаря новой тоннельной форме основания зуба, объем коррекционной работы может быть снижен на 20-30%. Вторичная морфология, абразивная, может также применяться при всех работах по протезированию.

SMA



Монтажный стол 140

Саггиталь

Уклон, боковой мышечковый (SKN)

FH 25° - CE 10°

Угол Беннетта 15° ISS 1,5 mm

Латеротрузия LRT -20°

Ретрузия RT 1,0 mm

SSA

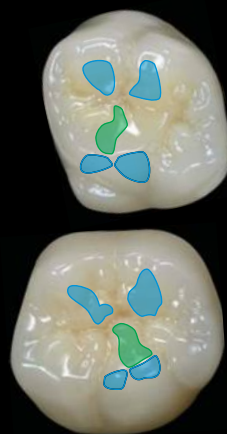


Таблица соответствия

Фронтальные зубы		Жевательные зубы		
Верхние	Нижние	Первичная морфология	Вторичная морфология	Вторичная морфология, абразивная
T24	L5	PM	SM	SMA
T27	L8	PM	SM	SMA
T66	L5	PS	SS	SSA
T76	L7	PS	SS	SSA
T99	L8	PM	SM	SLA
R14	L5	PM	SM	SMA
R17	L9	PM	SM	SLA
R66	L5	PS	SS	SSA
O31	L3	PS	SS	SSA
O54	L5	PS	SS	SSA
V 11	LV 1, L3, L 5	PS	SS	SSA, SMA
V 16	LV 6	PS	SS	SSA, SMA
V 22	L 7, LV 2	PM	SM	SMA
V 37	LV 6	PM	SM	SLA
V 43	LV 2, LV 6	PM	SM	SMA

Таблица соответствия носит рекомендательный характер.

* Цена в рублях указана по курсу 1 Евро = 41,5 руб.



• Gebdi Dentalprodukte GmbH - дочерняя компания Yeti Dentalprodukte GmbH



117485 г. Москва, ул. Профсоюзная, 88/20
 тел.: (495) 642-64-33(32); факс: (495) 330-54-58
 e-mail: mail@stomatorg.ru
<http://www.stomatorg.ru>