

# Набор Biocera Stain/Glaze

Biocera Stain/Glaze разделяется на два типа:


Красители и Глазурь.

Красители позволяют производить процесса окрашивания с максимальной свободой и персонализацией.

**Набор Biocera Stain/Glaze** — имеет 20 разнообразных цветов на выбор, которые с легкостью помогут воплотить любые решения.

Разнообразие оттенков позволяет легко адаптировать процесс окрашивания.

Система А, Система В, Система С, Система D, T0, Синий, Голубовато-серый, Пурпурный, Розовый, Темно-розовый, Оранжевый, Желтый, Оливково-зеленый, Белый, Черный, Темно-оранжевый, Коричневый, Красновато-коричневый, Глазурь.

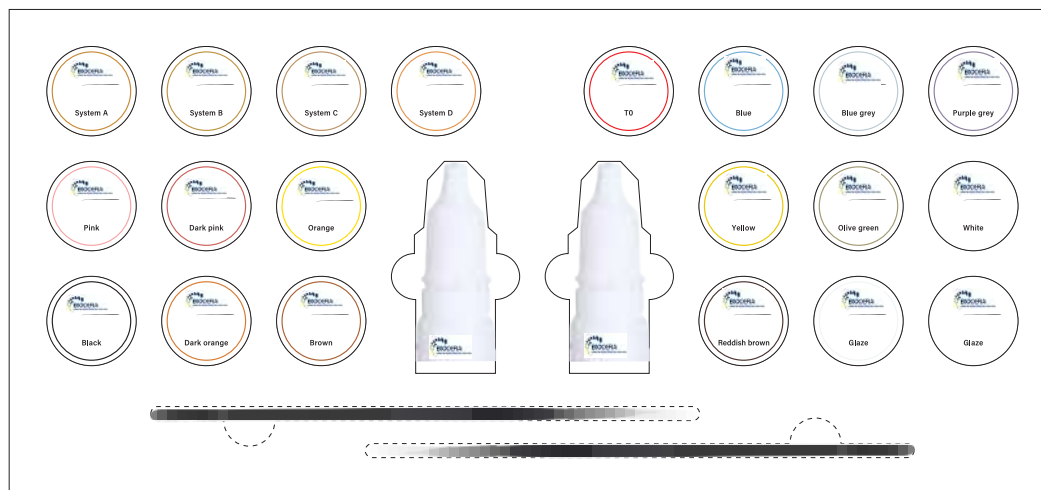

ООО «ДИАМЕД»

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок 17, литер А, пом. 2Н

Почта: ОПТ: [opt@diamedspb.ru](mailto:opt@diamedspb.ru) РОЗНИЦА: [info@diamedspb.ru](mailto:info@diamedspb.ru)

ОПТ: 8(812)389-65-05 РОЗНИЦА: 8(812)602-99-97; 8(812) 275-59-42 WhatsApp +7(996)790-57-58

Цвета:

Вісцер



System A



System B



System C



System D



Black



White



Olive green



Yellow



T0



Dark orange



Pink



Dark pink



Blue



Blue grey



Purple grey



Orange



Brown



Reddish brown




ООО «ДИАМЕД»

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок 17, литер А, пом. 2Н

Почта: ОПТ: [opt@diamedspb.ru](mailto:opt@diamedspb.ru) РОЗНИЦА: [info@diamedspb.ru](mailto:info@diamedspb.ru)

ОПТ: 8(812)389-65-05 РОЗНИЦА: 8(812)602-99-97; 8(812) 275-59-42 WhatsApp +7(996)790-57-58

# Концепция работы цвета

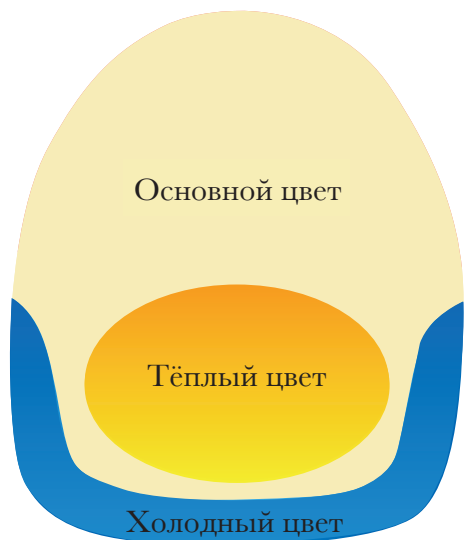

Основной  
цвет



System A



System B



System C



System D



Black



White

Три  
основных  
цвета



Yellow



Blue



T0

Конечный  
цвет



Blue grey



purple grey

Вторичный  
цвет



Dark orange



Olive green



Orange



Pink



Dark pink



Brown



Reddish brown



ООО «ДИАМЕД»

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок 17, литер А, пом. 2Н

Почта: ОПТ: [opt@diamedspb.ru](mailto:opt@diamedspb.ru) РОЗНИЦА: [info@diamedspb.ru](mailto:info@diamedspb.ru)

ОПТ: 8(812)389-65-05 РОЗНИЦА: 8(812)602-99-97; 8(812) 275-59-42 WhatsApp +7(996)790-57-58

# Характеристика поверхности



Трещины, кальцификация, белые пятна, лейкория, пигментация, прозрачность десен, ореолы.



Black



White



Reddish brown



Brown

Чтобы добиться более натурального эффекта, используйте основной цвет для смешивания и корректировки.



System A



System B



System C



System D



ООО «ДИАМЕД»

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок 17, литер А, пом. 2Н

Почта: ОПТ: [opt@diamedspb.ru](mailto:opt@diamedspb.ru) РОЗНИЦА: [info@diamedspb.ru](mailto:info@diamedspb.ru)

ОПТ: 8(812)389-65-05 РОЗНИЦА: 8(812)602-99-97; 8(812) 275-59-42 WhatsApp +7(996)790-57-58

# Процесс одноэтапного окрашивания




ООО «ДИАМЕД»

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок 17, литер А, пом. 2Н

Почта: ОПТ: [opt@diamedspb.ru](mailto:opt@diamedspb.ru) РОЗНИЦА: [info@diamedspb.ru](mailto:info@diamedspb.ru)

ОПТ: 8(812)389-65-05 РОЗНИЦА: 8(812)602-99-97; 8(812) 275-59-42 WhatsApp +7(996)790-57-58

# Блок-схема многократного окрашивания

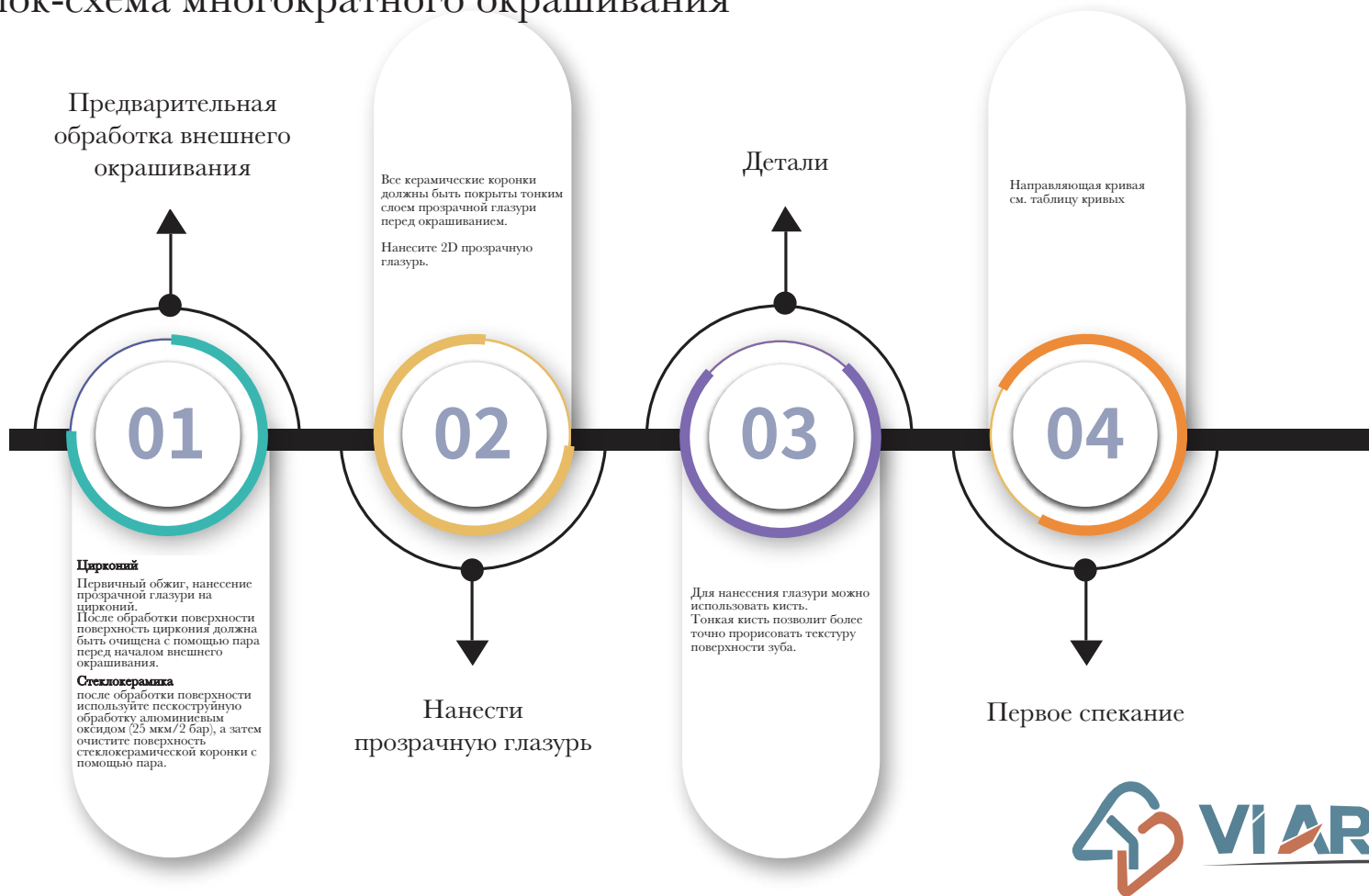


ООО «ДИАМЕД»

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок 17, литер А, пом. 2Н

Почта: ОПТ: [opt@diamedspb.ru](mailto:opt@diamedspb.ru) РОЗНИЦА: [info@diamedspb.ru](mailto:info@diamedspb.ru)

ОПТ: 8(812)389-65-05 РОЗНИЦА: 8(812)602-99-97; 8(812) 275-59-42 WhatsApp +7(996)790-57-58

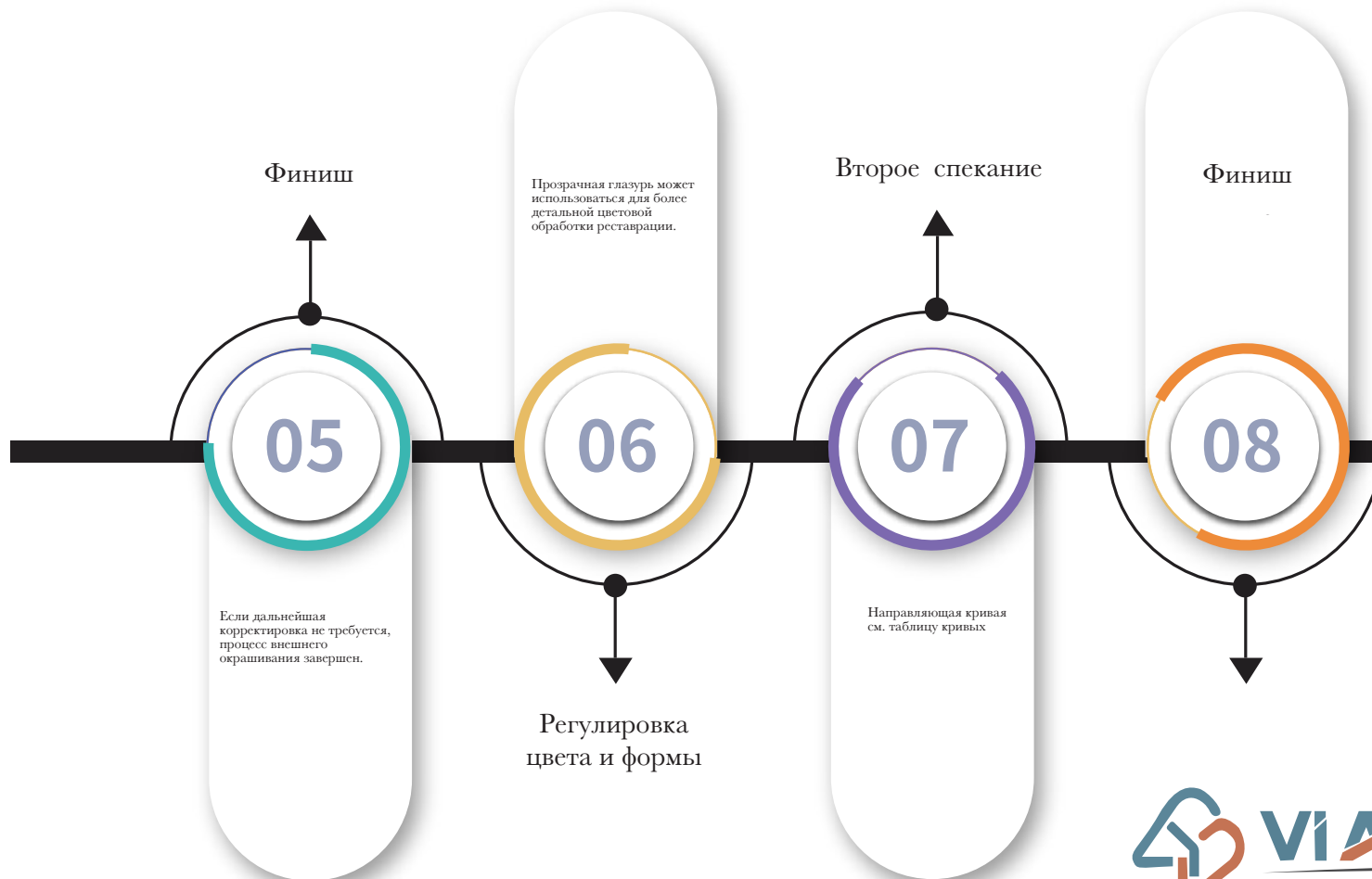

ООО «ДИАМЕД»

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок 17, литер А, пом. 2Н

Почта: ОПТ: [opt@diamedspb.ru](mailto:opt@diamedspb.ru) РОЗНИЦА: [info@diamedspb.ru](mailto:info@diamedspb.ru)

ОПТ: 8(812)389-65-05 РОЗНИЦА: 8(812)602-99-97; 8(812) 275-59-42 WhatsApp +7(996)790-57-58

# Stain/Glaze 2D прозрачная глазурь и цветная паста

## 2D цветная паста

- Паста имеет среднюю вязкость и может равномерно наноситься на поверхность любой керамической реставрации. Она не склонна к растрескиванию или текучести, что делает использование продукта более удобным
- Все пасты обладают высокой прозрачностью и флуоресценцией, что позволяет реставрациям выглядеть натурально, сохраняя при этом прозрачность, благодаря чему окрашенные реставрации имеют естественный вид.
- Керамические компоненты, заранее смешанные в пасте, могут повысить её прочность после спекания, что эффективно улучшает её износостойкость при дальнейшем клиническом использовании.



Before using 2D color paste



After using 2D color paste

## 2D прозрачная глазурь

Прозрачная глазурь может использоваться в сочетании с миксованной 2D цветной пастой, а метод микропасты позволяет максимально раскрыть эстетический эффект.

- Прозрачная глазурь улучшает яркость и может наноситься непосредственно на поверхность реставрации или смешиваться с небольшим количеством 2D цветной пасты.
- Прозрачная глазурь имеет различные стадии температурного контроля, что позволяет применять её для разных групп клиентов, учитывая их требования к яркости.



ООО «ДИАМЕД»

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок 17, литер А, пом. 2Н

Почта: ОПТ: [opt@diamedspb.ru](mailto:opt@diamedspb.ru) РОЗНИЦА: [info@diamedspb.ru](mailto:info@diamedspb.ru)

ОПТ: 8(812)389-65-05 РОЗНИЦА: 8(812)602-99-97; 8(812) 275-59-42 WhatsApp +7(996)790-57-58



# Параметр продукта

## Показания

Окрашивание внешней поверхности, характеристика, глазурь и т. д. для стеклянных материалов, полноформатных реставраций из циркония и стеклокерамики



Zirconia crown



Porcelain crown



Glass Ceramic

## Физические данные

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Модуль изгиба                    | $\geq 50 \text{ МПа}$   |
| Химическая растворимость         | $\leq 100 \text{ мкг} \cdot \text{см}^{-2}$                   |
| Коэффициент линейного расширения | $(9,5 \pm 0,5) \times 10^{-6} \text{ К}^{-1}$ (от 0 до 500°C) |
| Температура стеклования          | PAS: (520+20)°C, POW: (580+20)°C                              |



ООО «ДИАМЕД»


Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок 17, литер А, пом. 2Н

Почта: ОПТ: [opt@diamedspb.ru](mailto:opt@diamedspb.ru) РОЗНИЦА: [info@diamedspb.ru](mailto:info@diamedspb.ru)

ОПТ: 8(812)389-65-05 РОЗНИЦА: 8(812)602-99-97; 8(812) 275-59-42 WhatsApp +7(996)790-57-58

## Кривая обжига для окраски/глазурования:

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Начальная температура: | 500°C    |
| Время удержания:       | 1205 сек |
| Скорость нагрева:      | 40°C/мин |
| Конечная температура:  | 800°C    |
| Время удержания:       | 1205 сек |
| Охлаждение до:         | 300°C    |
| Скорость охлаждения:   | 50°C/мин |

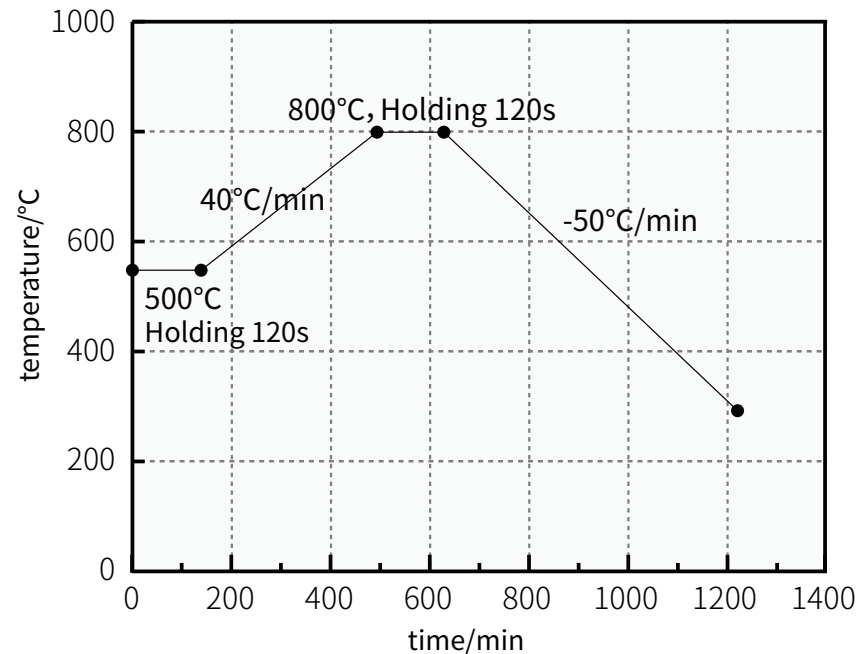

ООО «ДИАМЕД»

Адрес: Россия, Санкт-Петербург, Басков переулок 17, литер А, пом. 2Н

Почта: ОПТ: [opt@diamedspb.ru](mailto:opt@diamedspb.ru) РОЗНИЦА: [info@diamedspb.ru](mailto:info@diamedspb.ru)

ОПТ: 8(812)389-65-05 РОЗНИЦА: 8(812)602-99-97; 8(812) 275-59-42 WhatsApp +7(996)790-57-58